

XUL001 - LED LAMP WITH LENS



LED lamp with circular magnifying glass.

Head protector with hinge mechanism to protect against dust and scratching.

1. Installation

- Requires a MIMSAL mount, which is installed before the lamp is placed in position.
- A table clamp mount is supplied and wall or ceiling mounts or a rotating base can be supplied as optional accessories.
- MIMSAL cannot guarantee the life and functionality of the product where third party accessories are used.

2. Precautions

- Always disconnect the lamp from the power supply when cleaning or carrying out maintenance work.
- Clean either dry or using a weak solution of normal soap and water. Avoid using alcohol, acids or any type of organic solvent.
- Do not leave on for longer than 8 hours at a time.

3. Troubleshooting and maintenance

- **Maintenance:** Only for qualified electrical engineers or other qualified personnel.
- **Changing the circular LED module:**
 - Always disconnect the lamp from the power.
 - Loosen screws (1 and 3).
 - Remove LED protector (2).
 - Change the lens.

Please contact your MIMSAL rep if you have any other problem.

MIMSAL only accepts responsibility for maintenance, repair or changes carried out by MIMSAL staff using original MIMSAL parts.

The manufacturer reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

	XUL001 (09340)
Light bulb	LED HF 6W
Diopters	5 Dp.
Diameter	12,7 cm
Electrical Protection Class	Class II
International Protection	20
Useful life	40.000 h
Lux at 30 cm	2.000 Lux
Colour temperature	6.500° K
Colour Rendering Index	80%
Length of Arm	90 cm
Color	White
Weight	3 Kg
Power	220/230 V
Frequency	50/60 Hz

Lampada LED con lente circolare di ingrandimento.

Protezione della testa con meccanismo a cerniere per evitare polvere e abrasioni.

1. Installazione

- Necessita di supporto MIMSAL, da installare prima della collocazione della lampada.
- Si fornisce un supporto a morsetto da tavolo AH e, come accessori opzionali, eventualmente anche supporti da parete, soffitto o una base girevole.
- MIMSAL non può garantire la durata e la funzionalità in caso di utilizzo di accessori di terzi.

2. Precauzioni

- Scollegare la lampada dall'alimentazione elettrica ogniqualvolta si realizzano operazioni di pulizia o manutenzione.
- Pulire la lampada a secco o utilizzando una miscela delicata di acqua e sapone normale. Evitare l'utilizzo di alcol, acidi o qualsiasi tipo di solventi organici.
- Non lasciare la lampada accesa per oltre 8 ore consecutive.

3. Risoluzione dei problemi e manutenzione


- **Manutenzione:** Deve essere realizzata esclusivamente da installatori qualificati o altro personale qualificato.
- **Sostituire il modulo LED circolare:**
 - Scollegare la lampada dall'alimentazione elettrica.
 - Allentare le viti (1 e 3).
 - Rimuovere la protezione LED (2).
 - Sostituire la lente.

In caso di qualsiasi altro problema, contattare il rappresentante locale MIMSAL..

MIMSAL è responsabile unicamente della manutenzione, riparazione o sostituzioni realizzate utilizzando parti di ricambio originali e attraverso personale MIMSAL.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso.

	XUL001 (09340)
Sorgente luminosa	LED HF 6W
diottrie	5 Dp.
Diametro della lente	12,7 cm
Classe di protezione elettrica	Classe II
IP	20
Durata	40.000 h
Luce a 30 cm	2.000 Lux
Temperatura di colore	6.500° K
Resa cromatica	80%
Lunghezza del braccio	90 cm
Colore	Bianco
Peso	3 Kg
Potenza	220/230 V
Frequenza	50/60 Hz

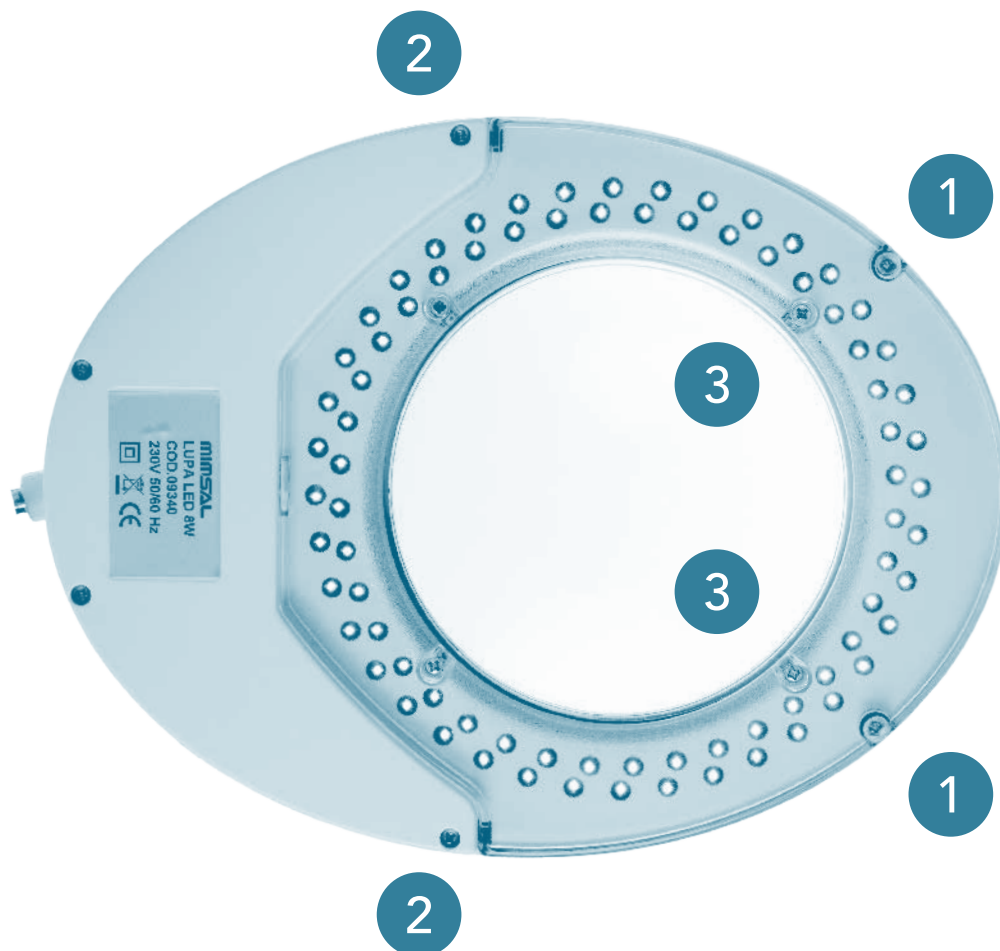

REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

CHINESPORT spa

Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy
Tel. 0432 621 621 - Fax 0432 621 620

export@chinesport.it

www.chinesport.com



MIMSAL TRADE S.L.

C. Mollet 17, Poligon Industrial Palou Nord
08401 Granollers (Barcelona) - Spain
mimsal@mimsal.com - www.mimsal.com
Tel. +34 930 139 860